

GMicro

Microstufa da laboratorio

Ideale per prove e test senza compromessi

Sistema di controllo *SMART AdvancedGalliSystem*:
microprocessore con doppio Display DIGITALE e
algoritmo di Controllo Ottimizzato con Azioni PID

Ideal for trials and tests without compromise

*SMART AdvancedGalliSystem control system:
microprocessor with double DIGITAL Display and
Optimized Control algorithm with PID Actions*



* Affidabile, sicuro e preciso

Reliable, safe and accurate

* Temperatura da ambiente a +120°C max

Room temperature to +120°C max

* Porta con Finestra Trasparente per
osservazione interna

*Door with transparent window for internal
observation*

* Visualizzazione contemporanea Set Point e
Temperatura Interna

*Simultaneous display of Set Point and Internal
Temperature*

* Elegante Struttura esterna verniciata senza
solvente

*Elegant external structure painted
without solvent*

* Prodotto Originale della F.lli Galli -
Made in Italy

*Original product of F.lli Galli -
Made in Italy*



GMicro

Micro Laboratory Oven

DOTAZIONI DI SERIE

Standard equipment

- N°01 Manuale d'uso e manutenzione
Use and maintenance manual
- N°01 Dichiarazione conformità CE
CE conformity declaration
- N°01 Certificato di Garanzia FGW
FGW Guarantee Certificate
- N°01 Certificato di Taratura a +100°C ACCREDIA
Calibration Certificate at + 100 ° C ACCREDIA
- N°01 Ripiano antiribaltamento, estraibile,
regolabile in altezza
Anti-tipping shelf, removable, height-adjustable


DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Safety devices


- * Cavo Separabile con Spina Shuko
Separable cable with Shuko plug
- * Fusibili Bipolari a protezione completa dell'impianto
Bipolar fuses to protect complete plant
- * Interruttore Generale Bipolare Luminoso Verde
Switch General Bipolar Bright green
- * Diagnostica di gestione Allarmi integrata
Integrated alarm management diagnostics
- * Termostato Sicurezza Indipendente
Independent Safety Thermostat

Mod. GMICRO	Micro Stufa da Laboratorio ad Aria Naturale					Natural Air Micro Laboratory Stove					AGS SMART +160°C		
Codice	L	P	H	L	Stile	Advanced Galli System Control	Display Digitale	PID	Sonda	Auto Tuning	Offset	Sicurezza Classe	Timer
GMICRO-OVEN03	150	150	150	3	da Banco	AGSystem Smart	Doppio	YES	Pt100	YES	YES	CI 3.1	YES
GMICRO-OVEN09	210	210	210	9	da Banco	AGSystem Smart	Doppio	YES	Pt100	YES	YES	CI 3.1	YES

Mod. GMicro 3
150x150x150mm

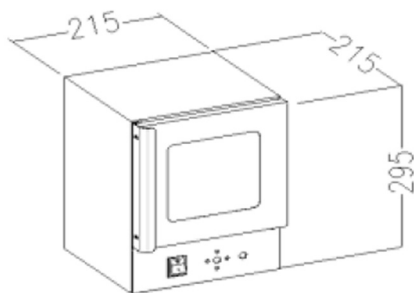

Mod. GMicro 9
210x210x210mm

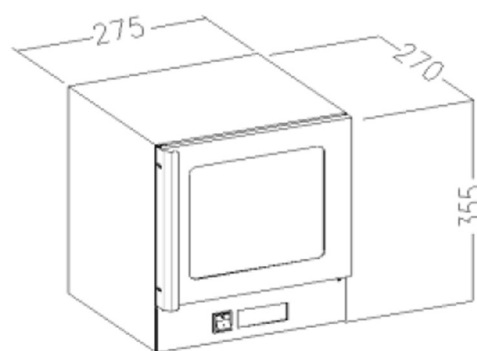

- * Efficiente coibentazione eco-compatibile
- * Camera in Alluminio Anodizzato
- * Guarnizioni in Silicone per alta temperatura
- * Funzione Autotuning per autosintonizzazione parametri
- * Sonda di temperatura al Platino PT100 Classe A
- * Relè Statico "Zero Crossing" antidisturbo
- * Piedini in gomma antisdrucciolo
- * Timer programmabile 99h 59m

- * Efficient eco-friendly insulation
- * Anodized aluminum chamber
- * Silicone gaskets for high temperature
- * Autotuning function for self-tuning parameters
- * PT100 Class A Platinum temperature probe
- * Anti-interference static "Zero Crossing" relay
- * Non-slip rubber feet
- * Programmable timer 99h 59m