



**SUPER
CONGELATORI -20/-70°C**

SuperG

130 | 230 | 300



Conservazione prodotti Biologici
a Bassissima Temperatura

Da **-20°C** a **-70°C** perfetti per diverse applicazioni in campo scientifico
e **indispensabili** per la **conservazione** di **farmaci e vaccini**.

DAL 1960 PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, VENDITA
E ASSISTENZA APPARECCHI SCIENTIFICI E INDUSTRIALI



SUPER CONGELATORI -20/-70°C


SuperG 130 | 230 | 300



Modello	SuperG 130	SuperG 230	SuperG 300
Volume	130 l	226 l	300 l
Campo di Temperatura	-20°C / -70°C	-20°C / -70°C	-20°C / -70°C
Interno w1 x d1 x h1	520 x 450 x 650 mm	850 x 450 x 650 mm	1100 x 450 x 650 mm
Vano w2 x h2	320 x 400 mm	650 x 400 mm	900 x 400 mm
Isolamento	100 mm	100 mm	100 mm
Refrigerante	Green	Green	Green
Temperatura Ambiente	+10°C / +25°C	+10°C / +25°C	+10°C / +25°C
Potenza	380 VA	460 VA	520 VA
Consumo 24h	4,3 Kwh	5,0 Kwh	5,2 Kwh
Alimentazione	230V 1f 50Hz	230V 1f 50Hz	230V 1f 50Hz
Esterno w x d x h	730 x 660 x 870 mm	1100 x 660 x 870 mm	1310 x 660 x 870 mm
Peso Netto	60 Kg	70 Kg	80 Kg
Imballo w x d x h	830 x 760 x 970 mm	1200 x 760 x 970 mm	1410 x 760 x 970 mm
Peso Lordo	66 Kg	78 Kg	90 Kg

Il produttore si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche e l'estetica del prodotto.

- Campo di Temperatura regolabile da -20°C a -70°C.
- Controllo a Microprocessore Digitale con risoluzione di $\pm 0,1^\circ\text{C}$.
- Sistema di Allarme Acustico-Luminoso con Contatto per la connessione a sistemi esterni remoti.
- Compatto, occupa poco spazio e le ruote facilitano il posizionamento.
- L'apertura dall'alto consente l'accesso al vano per le operazioni di carico e scarico e riduce la perdita di "freddo".
- Portello completo di chiusura con chiave per limitare gli accessi.
- Efficiente isolamento e pannelli interni di contro-chiusura evitano dispersioni verso l'ambiente.
- Sistema di refrigerazione esclusivo abbina la tecnologia ad un compressore con una miscela di gas refrigeranti naturali ed ecologici.

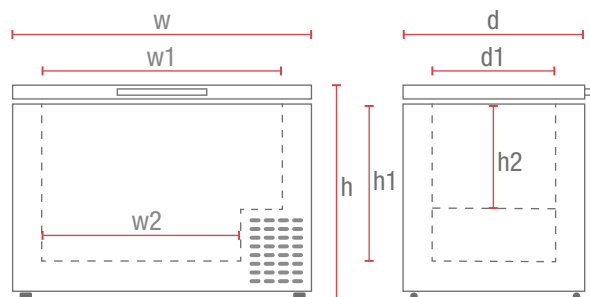

F.lli Galli G.&P. : Via dell'Artigianato 12
20090 Fizzonasco di Pieve Emanuele - Milano Italia
Phone +39 0290720705 - info@galli2europe.com

www.galli2europe.com

